


NGPRECISION+

SCHWANGERSCHAFTSBLUTTEST

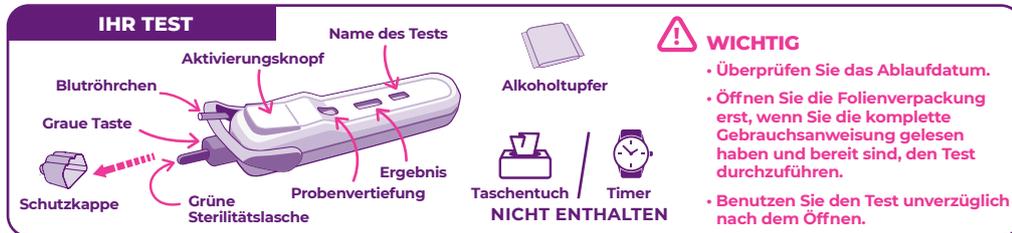

DURCHFÜHRUNG DES TESTS UND ABLESEN DES ERGEBNISSES

Weitere Informationen finden Sie auf der Rückseite.

FAQ

1 Wann kann ich den NG Precision+ Test anwenden?

Der Test ist in der Lage, eine sehr kleine Menge (Sensitivität 10 mIU/ml) hCG (humanes Choriongonadotropin), einem Hormon, das vom Körper ab Beginn der Schwangerschaft produziert wird, festzustellen. Es wird empfohlen, den Test so nah wie möglich am voraussichtlichen Datum der nächsten Periode durchzuführen, um ein möglichst zuverlässiges Ergebnis zu erhalten. Wenn der Test zu früh durchgeführt wird, kann es aufgrund eines zu niedrigen hCG-Spiegels, zu falsch negativen Ergebnissen kommen.

2 Wie lange sollte ich warten, bis das Ergebnis abgelesen werden kann?

Sie müssen mindestens 5 Minuten warten, bevor Sie das Ergebnis ablesen (nicht mehr als 10 Minuten warten, um das Ergebnis abzulesen).

3 Das Ergebnis zeigt an, dass ich schwanger bin: Was muss ich jetzt tun?

Sie sollten Ihren Arzt oder Frauenarzt aufsuchen, um die nächsten Schritte zu besprechen.

4 Das Testergebnis zeigt an, dass ich nicht schwanger bin, aber ich bin nicht davon überzeugt?

Möglicherweise haben Sie den Test zu früh vor dem erwarteten Beginn Ihrer nächsten Periode durchgeführt. Wiederholen Sie den Test 48 Stunden später. Wenn das Testergebnis 3 Tage nach dem erwarteten Beginn Ihrer nächsten Periode noch negativ ist, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

5 Warum wird NG Precision+ mit Blut durchgeführt?

Wenn Sie schwanger sind, produziert Ihr Körper das Hormon hCG, welches im Blut schneller nachgewiesen werden kann als im Urin. Labore führen Schwangerschaftstests aus diesem Grund mit Blut durch.

6 Ist der Test schmerzhaft?

Ein Stich in Ihren Finger zu Abnahme eines kleinen Tropfen Blutes ist kaum schmerzhaft. Drehen Sie die grüne Sterilitätslasche ab und drücken Sie fest die graue Spitze, um Ihren Finger zu stechen.

7 Der Test hat nicht ordnungsgemäß funktioniert (es erscheint keine Kontrolllinie).

- Haben Sie den Test nach dem Einstechen des Fingers auf eine flache Oberfläche gelegt?
- Haben Sie die Wartezeit von mindestens 5 Minuten eingehalten?
- Haben Sie das Blutröhrchen komplett befüllt? Falls nicht, muss die Testung mit einem neuen Test wiederholt werden.

8 Kann die Einnahme von Medikamenten oder der Gesundheitszustand das Ergebnis beeinflussen?

- Bestimmte Medikamente, Behandlungen oder Krankheiten können das Ergebnis, wie z. B. hCG-basierte Fertilitätsmedikamente, beeinflussen.
- Wenn Sie kürzlich schwanger waren, kann der Test hCG-Rückstände im Blut nachweisen.
- Wenn Sie in den Wechseljahren oder vor der Menopause sind.

9 Kann ich den Test wiederverwenden?

Nein, dieser Test kann nur einmalig verwendet werden.

TIPPS ZUR BLUTENTNAHME

- Waschen Sie zuerst Ihre Hände mit warmem Wasser und trocknen Sie diese gründlich ab.
- Warmes Wasser wirkt durchblutungsfördernd im Bereich der Fingerspitzen.
- Für eine bessere Durchblutung, lassen Sie die Hand vor dem Einstich ca. 1 Minute herunterhängen.
- Wenn sich nicht sofort ein Blutstropfen gewinnen lässt, üben Sie mit dem Finger hinter der Einstichstelle Druck aus, um den Blutstropfen herauszudrücken.

VERWENDUNGSZWECK UND TESTPRINZIP

Wenn Sie schwanger sind, produziert Ihr Körper humanes Choriongonadotropin (hCG). NG Precision+ ist ein immunochromatographischer Test für den qualitativen Nachweis von hCG in menschlichem Kapillarblut mit einer Sensitivität von 10 mIU/mL, das aus der Fingerkuppe entnommen wird. Dieser schnelle und einfach anzuwendende Test kann überall und zu jeder Tageszeit verwendet werden. Der Test wird mithilfe eines entnommenen Blutstropfen aus der Fingerkuppe und durch dessen Einbringen über das Kapillarröhrchen in die Testvertiefung durchgeführt. Anschließend wird eine Lösung freigesetzt, um die Migration der Blutprobe zu erleichtern. Der Test beinhaltet Antikörper, die das hCG-Hormon feststellt, und im Falle eines positiven Ergebnisses eine farbige Linie im „T“-Bereich des Tests anzeigt.

Bei den reaktiven Komponenten handelt es sich um einen monoklonalen anti- α -hCG-Antikörper und einen monoklonalen anti- β -hCG-Antikörper, der an einen optischen Marker (kolloidales Gold) gekoppelt ist.

VORSICHTSMAßNAHMEN

- Der Test ist ein Einmaltest. Nicht wiederverwenden.
- Verwenden Sie den Test nicht, wenn der Beutel beschädigt oder zerrissen ist.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwenden Sie den Test sofort nach dem Öffnen des Beutels.
- Das Lesefenster darf nicht berührt werden (Ergebnis Bereich).
- Bewahren Sie den Test zwischen 4 °C und 30 °C im mitgelieferten Beutel auf. Der Test ist haltbar bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum. Nicht einfrieren.
- NG Precision+ ist nur für die Verwendung mit Blutproben bestimmt.
- Blut sollte sofort auf die Probenvertiefung übertragen werden.
- Der Test sollte während der Wartezeit auf einer ebenen Fläche abgelegt werden. Der Test sollte niemals senkrecht abgelegt werden.

ENTSORGUNG

Um den NG Precision+-Test zu entsorgen, geben Sie den Test und den Inhalt der Packung in einen Müllbeutel und bringen Sie ihn zur Vernichtung in eine Apotheke.



NG·BIOTECH®
LABORATOIRES

Z.A. Courbouton - Secteur 1
35480 Guipry - FRANCE

www.ngprecision.com

REF Artikelnummer

LOT Chargennummer

IVD In-Vitro-Diagnostikum

Hersteller

30°C
4°C

Temperaturgrenzwerte
4°C-30°C

Gebrauchsanweisung
lesen

Nicht wiederverwenden

Bei beschädigter
Verpackung nicht verwenden

Inhalt ausreichend
für einen Test

Verfallsdatum

CE 0483

NGB-HCG-W21-005 - ENO33HCG / Rev: 220704 / DE

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR ANWENDUNG DES TESTS SORGFÄLTIG

1 VORBEREITUNG

Massieren Sie Ihren Finger für einige Sekunden (Mittel- oder Ringfinger), reinigen Sie diesen mit dem Alkoholtupfer und lassen Sie ihn anschließend an der Luft trocknen.

Drehen und entfernen Sie die grüne Lasche und entsorgen Sie diese anschließend.

Für den Einstich drücken Sie Ihren Finger fest auf die graue Spitze.

DRÜCKEN SIE FEST

⚠️ Es piekt nur einmal

2 ENTNAHME

Legen Sie den Test auf eine flache Oberfläche. Drücken Sie den Finger fest unterhalb der Einstichstelle, bis ein kleiner Blutropfen entsteht. Führen Sie diesen an das Blutröhrchen und füllen Sie es komplett.

Berühren Sie die Spitze des Blutröhrchens mit Blut.

WICHTIG
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, wischen Sie den Finger sauber und drücken Sie erneut

FALSCH
Das Röhrchen muss voll sein

RICHTIG
Das Blutröhrchen ist jetzt mit der richtigen Menge Blut gefüllt

3 ERGEBNIS

Halten Sie den Test auf dem Tisch fest. Drehen Sie nun das Blutröhrchen in die Vertiefung um.

UMDREHEN
Prüfen Sie, ob das Blut aus dem Röhrchen in die Probenvertiefung gelangt ist

KLICKEN
Drücken Sie fest auf den Aktivierungsknopf, um den Test zu aktivieren

UND 5 MINUTEN WARTEN

Nach 10 Min. nicht mehr ablesen.

| ERGEBNISINTERPRETATION | |
|------------------------|----------------------------|
| SCHWANGER | NICHT SCHWANGER |
| UNGÜLTIG | |

⚠️ Lassen Sie den Test zum einfacheren Befüllen des Blutröhrchens liegen

